


**INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE  
LICENZA WINDOWS**



**DELTA-DENT**

**Tracciati Cefalometrici**

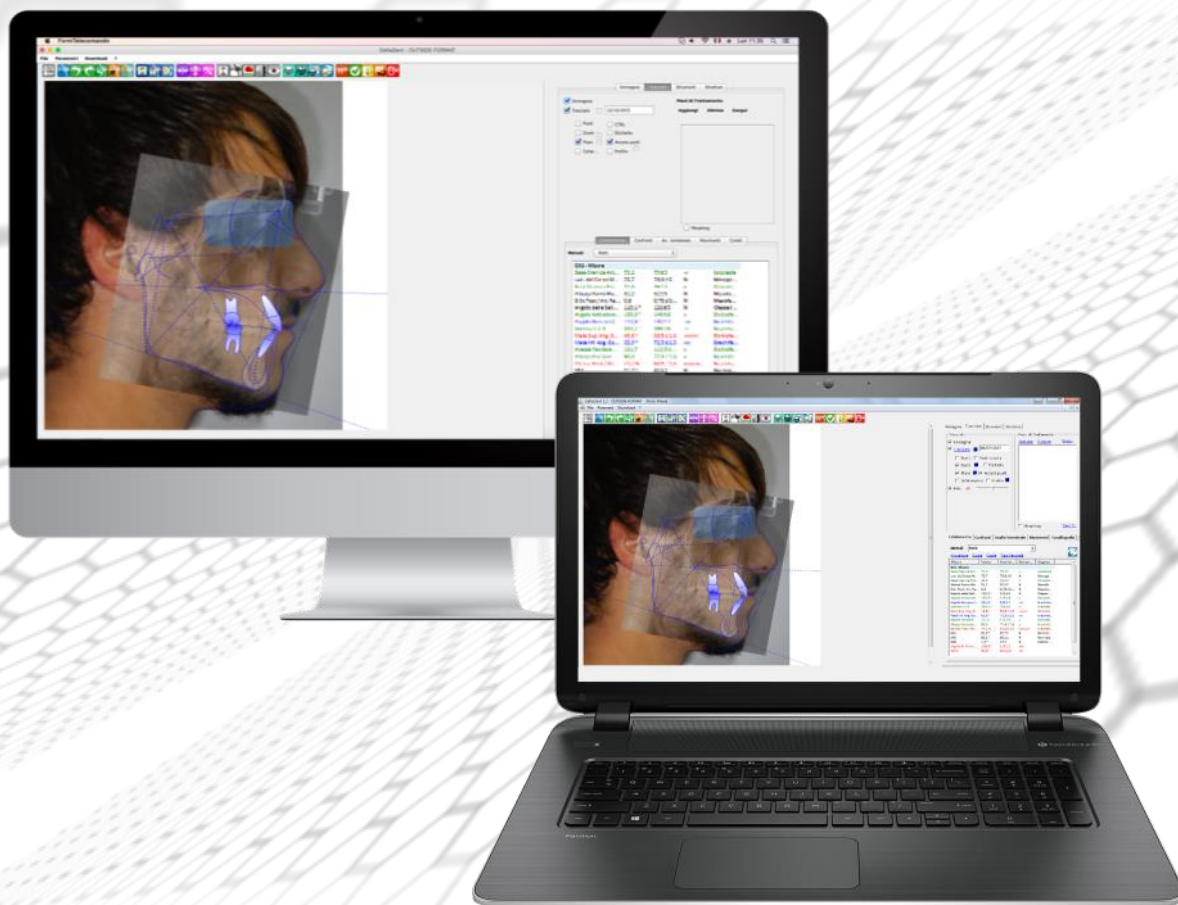

**Revisione 1 del 25/01/2021**



**Outside Format**  
Via Circonvallazione D, 28 - 26025 Pandino (CR)  
Tel. 0373.624489 - info@outsideformat.com  
www.outsideformat.com



Per sistemi **Windows**



## 1. DESTINAZIONE D'USO (Intended Use)

Il software “DELTA-DENT”, dispositivo medico di classe Im, è destinato ad effettuare misurazioni lineari ed angolari (raggruppate in analisi cefalometriche) su lastre del cranio e fotografie del viso dei pazienti.

Il software “DELTA-DENT” è destinato all'utilizzo da parte di personale medico qualificato.

Il software non è da considerarsi diagnostico in quanto effettua delle misure che devono essere elaborate dal personale medico qualificato per poter essere utilizzate a fini diagnostici ed orientare le terapie per il paziente.

Le misure non sono inoltre precise in assoluto (ad eccezione dei file con estensione DCM, Stl, obj), ma dipendono dalla calibrazione effettuata dall'utente sull'immagine.

## 2. CLASSIFICAZIONE

Il software “DELTA-DENT” è stato classificato come dispositivo medico di **classe I m**. Inoltre questo SW può essere classificato secondo la EN IEC 62304 nella **Classe A**.

## 3. FABBRICANTE

La ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante è il seguente:

### **Outside Format**

Outside Format di Meola Fabio: Via Circonvallazione D, 28  
26025 Pandino (CR)  
Tel. 0373 624489

## 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Direttive Comunitarie e norme di legge

- Direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993 riguardante i dispositivi medici e s.m.i (Direttiva 2007/47/CE del 5.9.2007)
- D.lgs. 46 del 24.2.1997 e s.m.i. (D.lgs. 95 del 25.2.1998)—Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici; D.lgs. 37 del 25.1.2010—Attuazione della Direttiva 2007/47/CEE concernente i dispositivi medici.






- Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici Testo rilevante ai fini del SEE.

#### **Norme Tecniche Armonizzate di riferimento**

- IEC 62304:2006+AMD1:2015 CSV Consolidated version: Medical Device Software – Software life cycle processes.
- IEC 62366-1:2015: Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices.
- UNI CEI EN ISO 14971:2012: Dispositivi medici. Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici.
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017: Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite – Parte 1: Requisiti generali
- UNI CEI EN 1041:2014: Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici.
- IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV Consolidated version: Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability.
- IEC/TR80002-1:2009 Medical device software -- Part 1: Guidance on the application of ISO 14971 to medical device software.

## **5. SIMBOLI IMPIEGATI SUL DISPOSITIVO MEDICO**

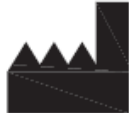Il software “DELTA-DENT” presenta diversi simboli, qui elencati ed illustrati. L'utente è tenuto a prendere nota del significato di tutti i simboli ed a rispettarne le indicazioni implicite.

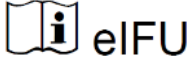	<p>Simbolo che identifica il FABBRICANTE.</p>
	<p>Simbolo REF identificativo del dispositivo medico.</p>
	<p>Fare riferimento al Manuale d'Uso.</p>
	<p>Leggere le istruzioni elettroniche.</p>
	<p>Marchio di conformità CE. Notified Body 0068 è posto sotto il simbolo.</p>

**Requisiti minimi di sistema:**



**Windows**

Windows 10  
 CPU: 2 GHz  
 RAM: 2 GB  
 HDD: 500 Mb  
 .NET Framework



## SOMMARIO


Installazione Windows  
Attivazione Windows

Pag. 1  
Pag. 5

## PREMESSA


La presente guida illustra i passaggi da effettuare per l'attivazione di una **licenza cliente** del software Delta-Dent in ambiente Windows.

I file di installazione sono disponibili all'indirizzo [www.outsideformat.com/it/download.php](http://www.outsideformat.com/it/download.php).

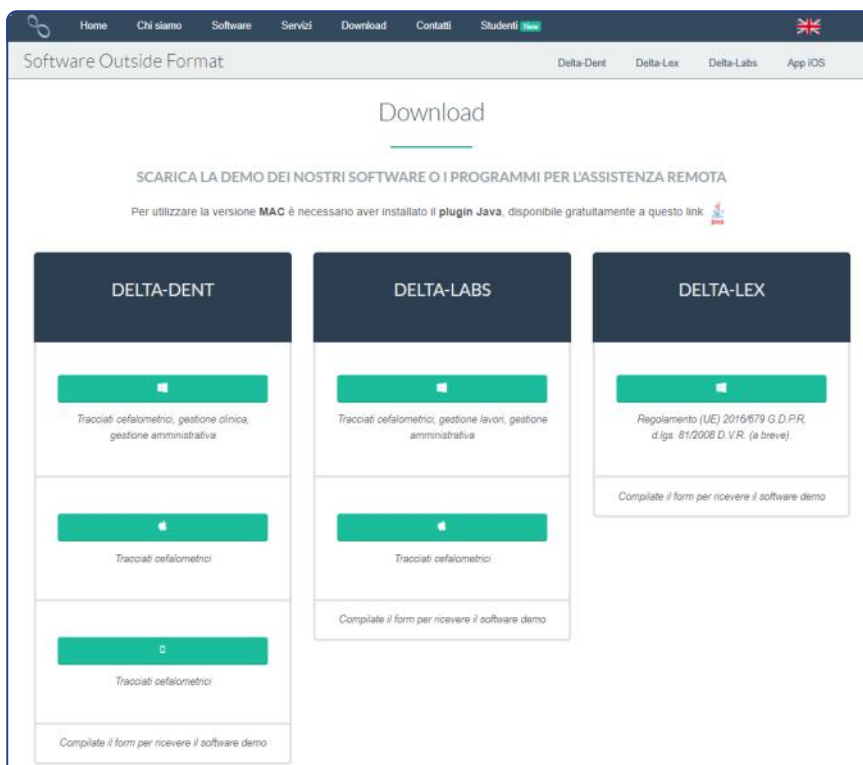


**N.B. Per attivare la licenza è necessaria una connessione ad internet.**

Avviare il file di installazione Delta-Dent.exe.

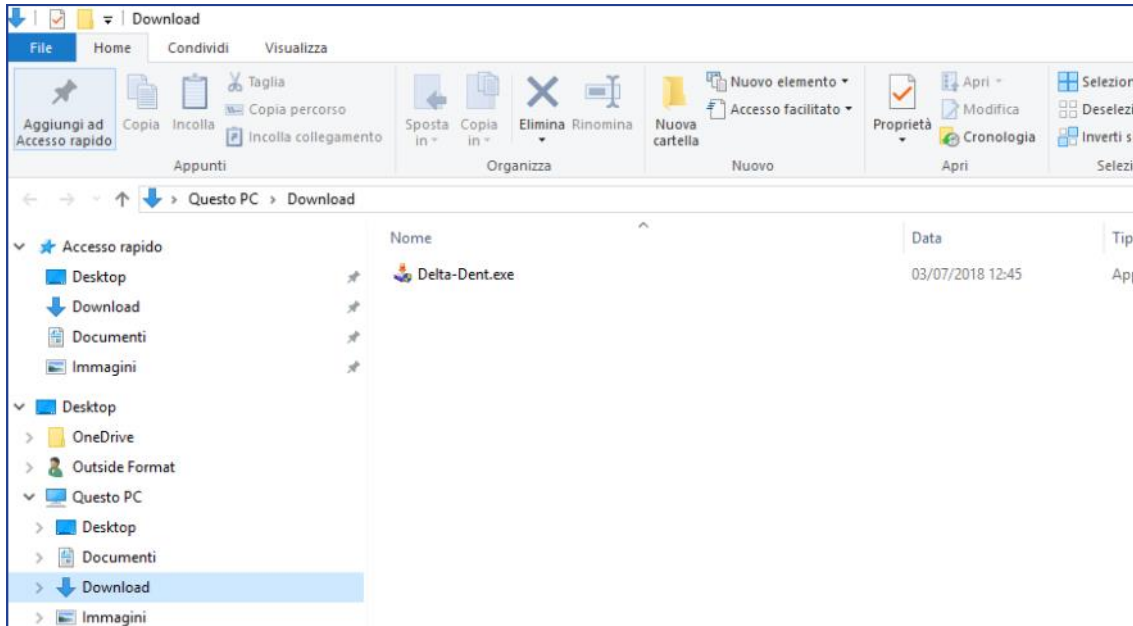


Premere AVANTI.

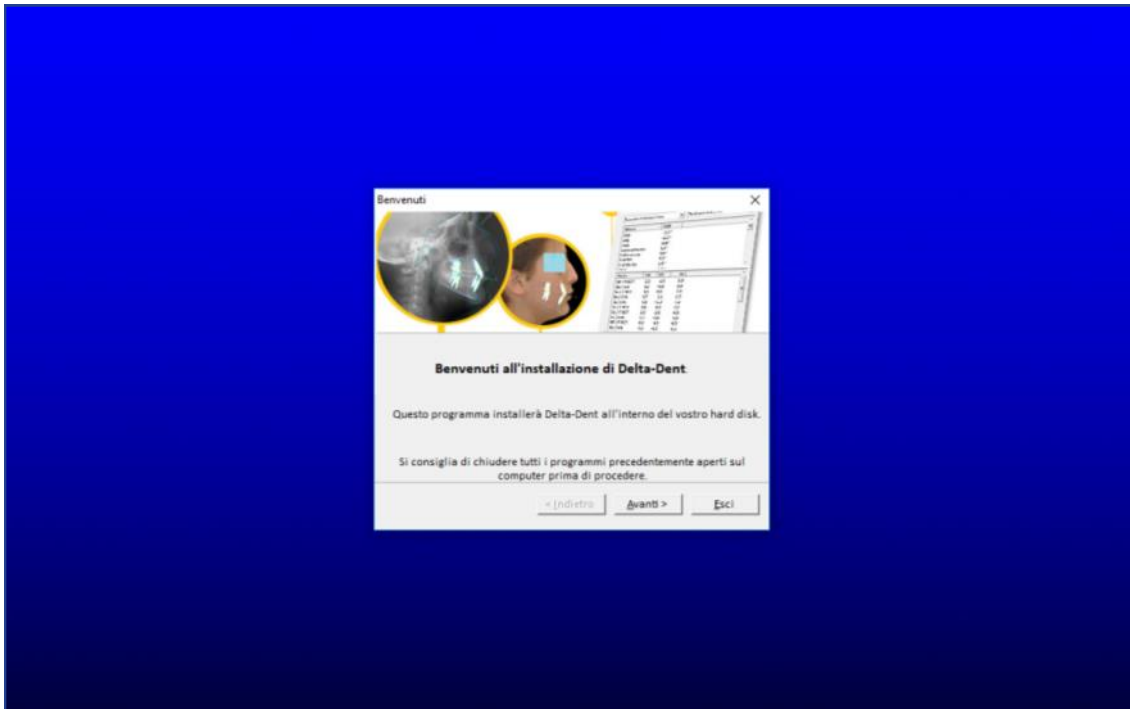





Accettare le condizioni di utilizzo software e premere AVANTI.

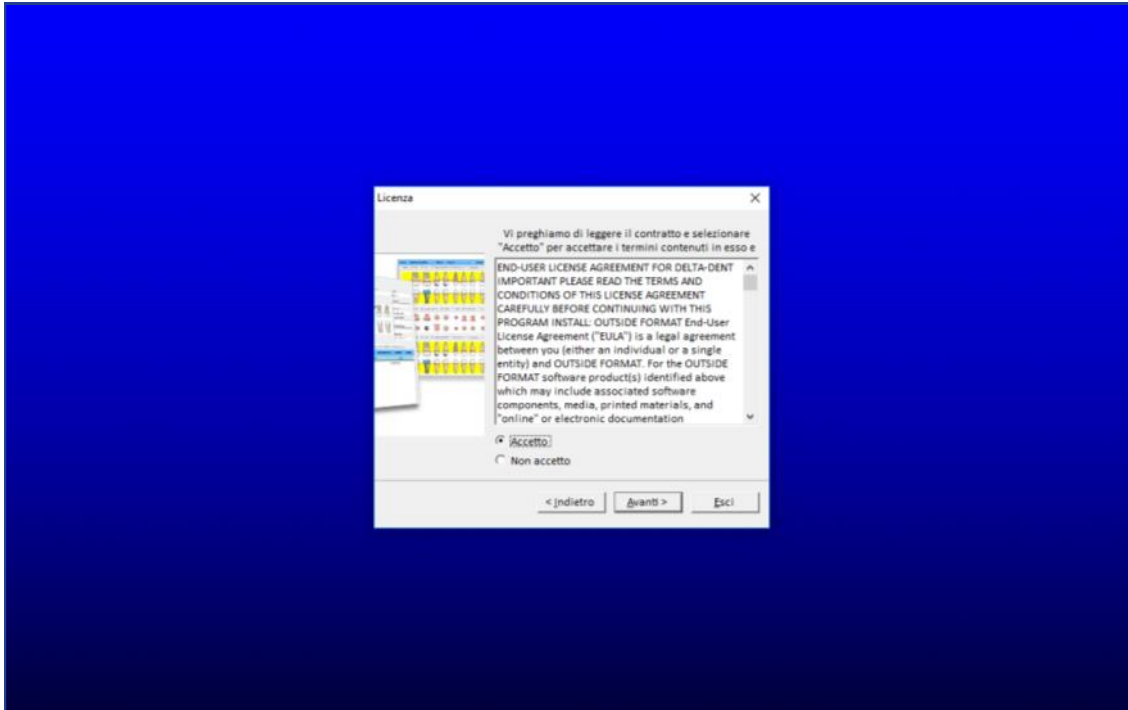


Confermare il percorso di installazione e premere AVANTI.

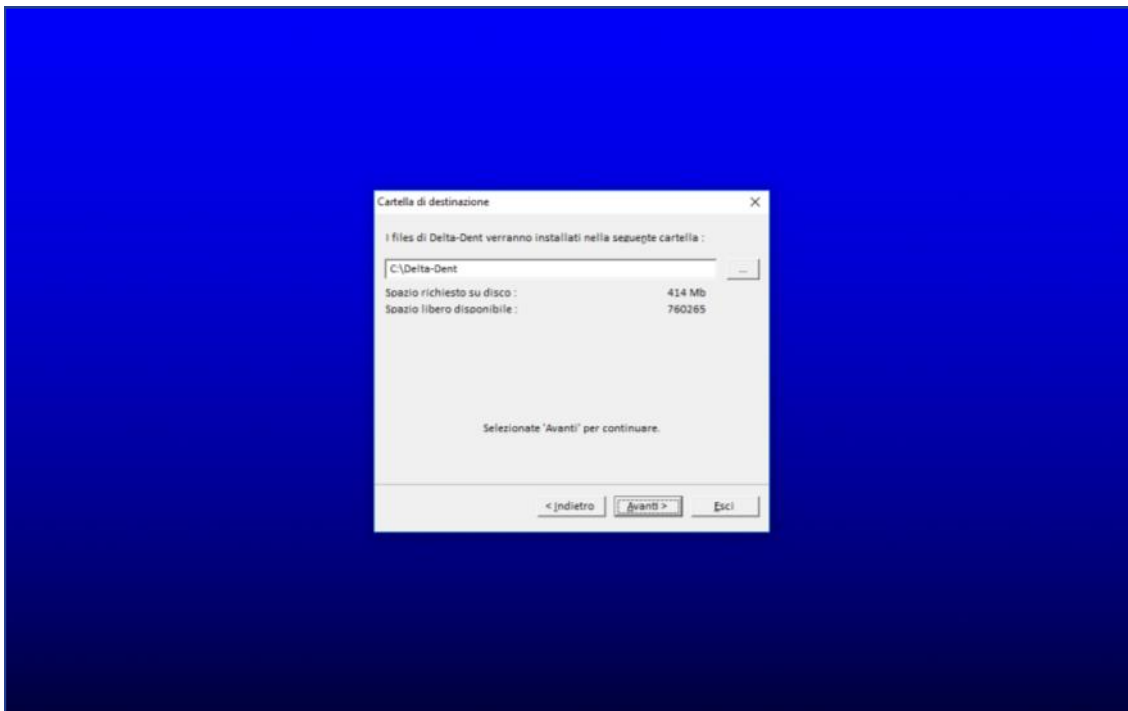


Confermare la creazione della cartella premendo SÌ.

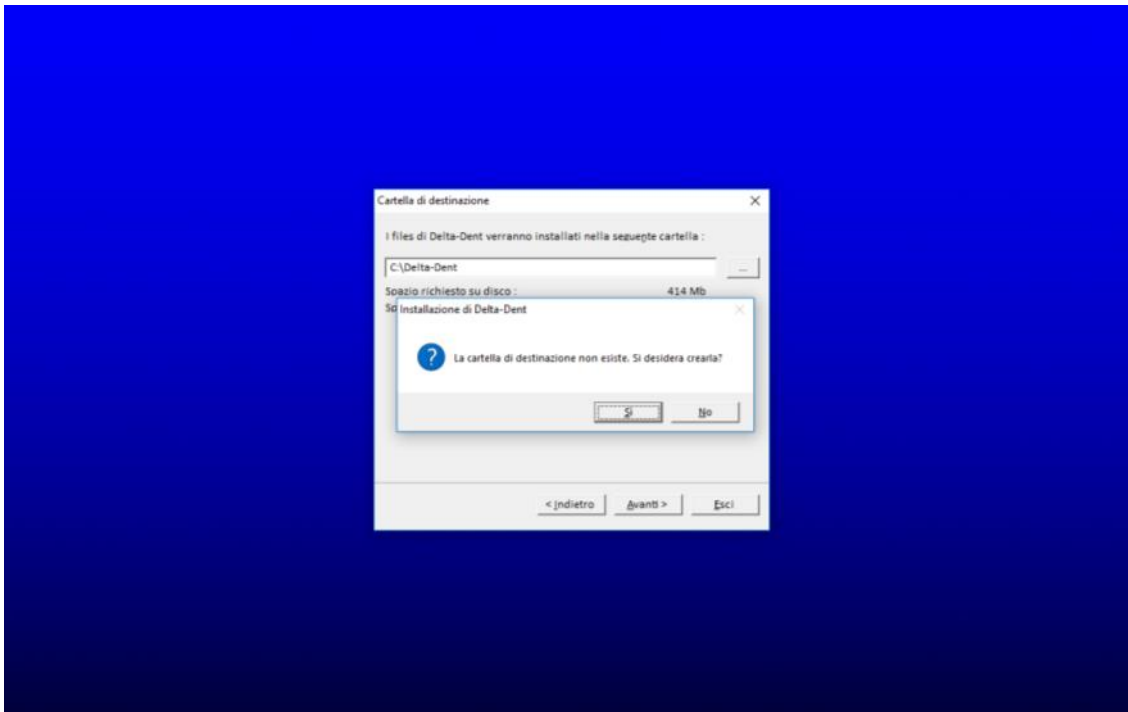


Premere AVVIA per iniziare l'installazione.

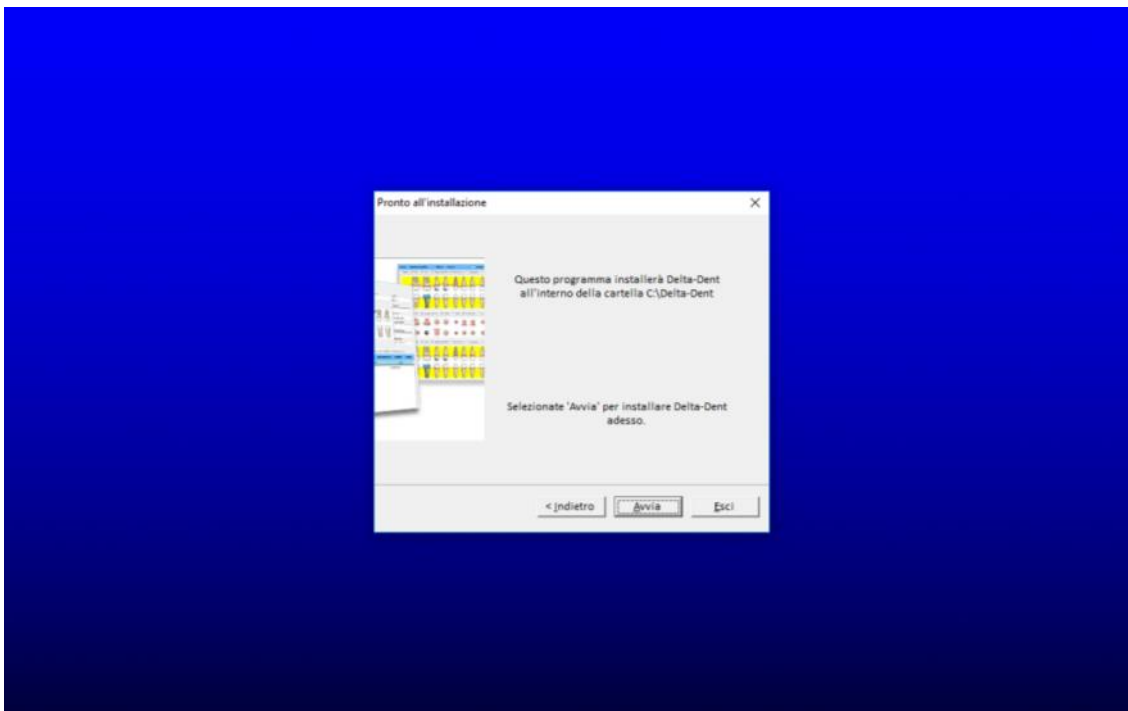

Attendere il completamento dell'installazione.

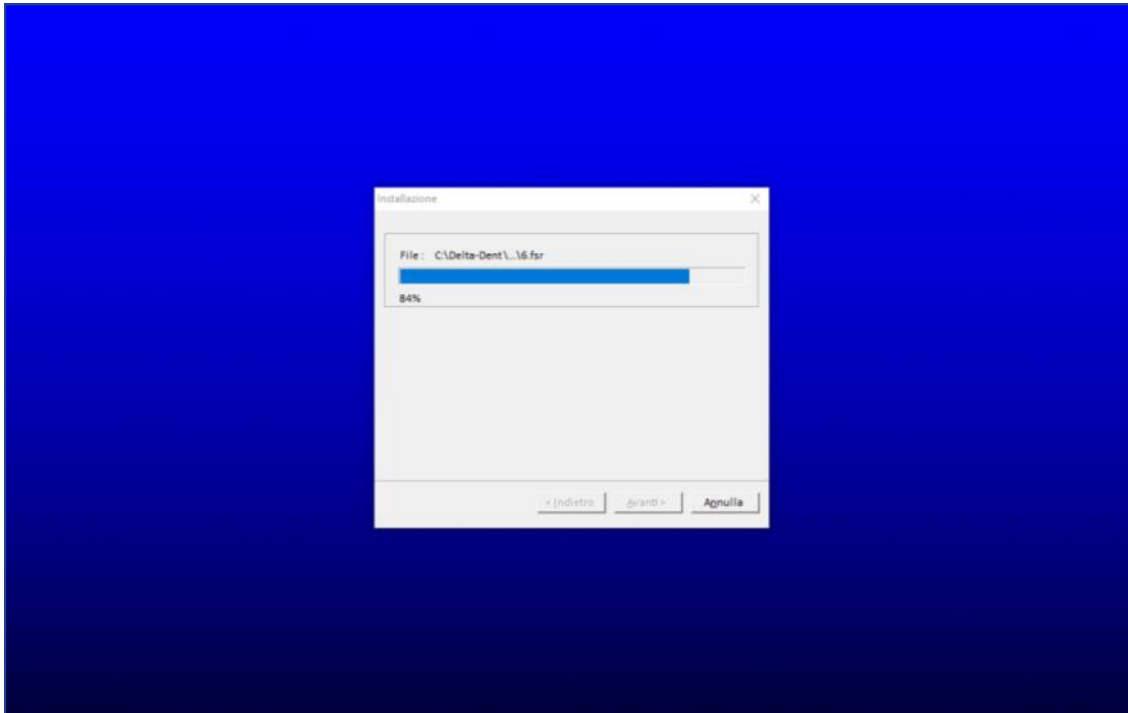

Premere ESCI per avviare il programma al termine dell'installazione.

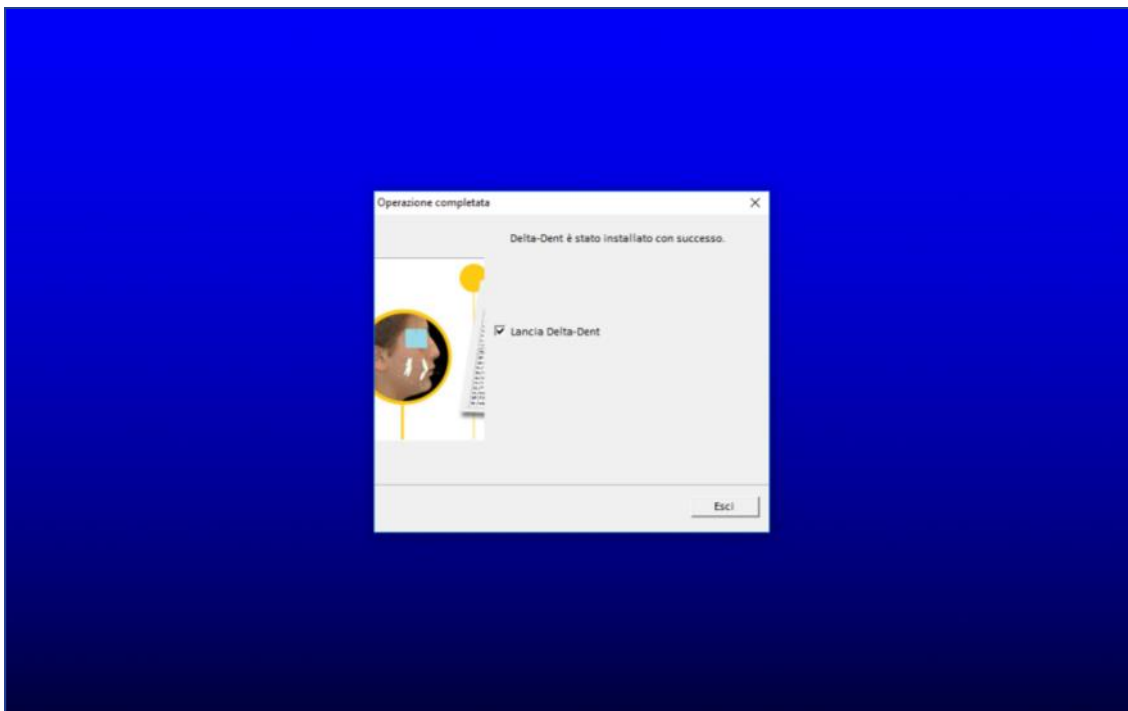

Prima di procedere con l'attivazione, è necessario collegarsi alla rete internet.

Avviare il programma tramite l'icona sul desktop.



Al primo utilizzo viene chiesto di registrare il prodotto o utilizzare la versione DEMO.

FormAvvioDomanda

**Prova la Demo**

**Attiva Delta-Dent**

Premere ATTIVA DELTA DENT

FormAvvioDomanda

**Richiedi STUDENT**

**Registra Licenza**

Premere REGISTRA LICENZA

FormAttiva

Licenza

[Attiva Delta-Dent](#)

Inserire il codice di attivazione ricevuto tramite e-mail e premere ATTIVA DELTA-DENT.




**outside format**

**LICENZA D'UTILIZZO SOFTWARE**

**INTESTATARIO**  
 Rag. Sociale OUTSIDE FORMAT  
 Indirizzo Via Sacco E Vanzetti, 26/E  
 Città Paulo CAP 20067 Prov. MI  
 Telefono 0290687093  
 Fax - E-Mail info@outsideformat.com  
 CF/P.IVA 06040590967 - MLEFBA80B24G273U

**DETTAGLI LICENZA**  
 Software: Delta-Dent - Tipologia: Versione Professional  
 N° PC abilitati: 10

Software	Licenza
Delta-Dent	1234567890ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

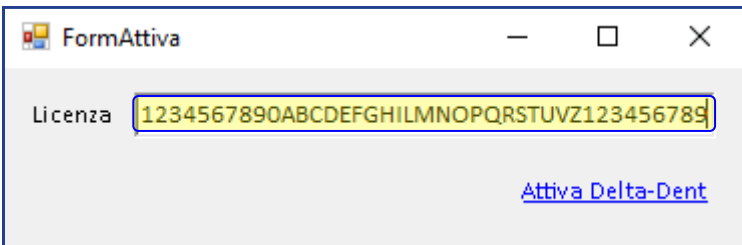

FormAttiva

Licenza

[Attiva Delta-Dent](#)

Se l'operazione è andata a buon fine, è possibile effettuare il login.



FormPassword

Utente  
 Utente Cefalometrie

Password

Login

Al primo utilizzo, la Password non è impostata. Premere LOGIN per accedere.





# outside format



## **Outside Format**

Via Circonvallazione D, 28 - 26025 Pandino (CR)

Tel. 0373.624489 - [info@outsideformat.com](mailto:info@outsideformat.com)

[www.outsideformat.com](http://www.outsideformat.com)

### **Requisiti minimi di sistema:**



**Windows**

Windows 10  
CPU: 2 GHz  
RAM: 2 GB  
HDD: 500 Mb  
.NET Framework